

一般歯科医師向けのマウスピース矯正

インビザライン Go™ システム



invisalign go™

大臼歯を動かさない、第二小臼歯間の治療オプション

invisalign go™ plus

第一大臼歯間の治療オプション



一般歯科医師の幅広いニーズに対応した 歯列矯正システム

invisalign go™

大臼歯を動かさない、第二小臼歯間の治療オプション

invisalign go™ plus

第一大臼歯間の治療オプション

インビザライン Go™ システムは、一般歯科医師向けのアライナー型矯正装置です。予測実現性のある治療計画をドクターが作成するための支援体制があるため、矯正専門医でなくとも、インビザライン Go™ システムをご使用いただくことが可能です。

インビザライン Go™ システムが 患者様に選ばれている理由

矯正が主訴ではないが…「低予算であれば／短期間であれば※、矯正を検討したい」「前歯の歯並びが気になっていた」インビザライン Go™ システムはそのような患者様のニーズに対して提案できるソリューションです。



治療中でも目立ちにくい



取り外して清潔に保てる



自然な付け心地を追求した、
独自開発の素材を使用




治療前に治療のゴールがイメージできる

※インビザライン・システムと比較して

アライン・テクノロジー社特有の スマートテクノロジー

当社では、予測実現性と結果の向上のため、20年以上にわたり、3つの技術を開発してきました。

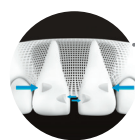

SmartForce™ 機能

移動の適切なコントロール


予測実現性のある歯牙移動を実現する為に必要なフォースシステムが組み込まれたアタッチメントと機能です。



SmartTrack™ 素材

独自の素材

高い弾性を持ち、より正確にフィットするSmart Track 素材は、より持続的なフォースを加えることで歯牙移動のコントロールを高めます。

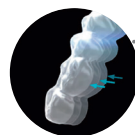

SmartStage™ テクノロジー

歯牙移動を実行するためのアライナーの形状

高度なアルゴリズムによって、歯牙移動の適切な進め方と治療の各ステージのアライナーの形状を決定します。

世界でインビザライン Go™ システムで治療をされた患者様の例

治療期間：2か月



正中離開の閉鎖

治療期間：3か月



軽度の叢生改善
正中線的一致

治療期間：4か月



下顎叢生の改善

治療期間：13か月




上下顎叢生の改善
クロスバイトの改善

※本資料で掲載された症例は参考治療例であり、治療結果、治療期間等は、患者様の歯列や口腔の状態により異なります。掲載された治療結果、治療期間等を保証するものではありません。
※アライナー1ステージ当たりの装着期間は、患者様の歯列や口腔の状態によって異なります。歯科医師の指示に従ってください。
※使用上の注意、適応、禁忌事項等はインビザライン・システム取扱説明書や歯科医師の指示に従ってください。



一般歯科に来院する潜在患者様に対するソリューション

矯正が主訴の患者様は、年間で30万人（日本）
日本は、矯正以外の主訴が目的で一般歯科に来院される患者様が多い

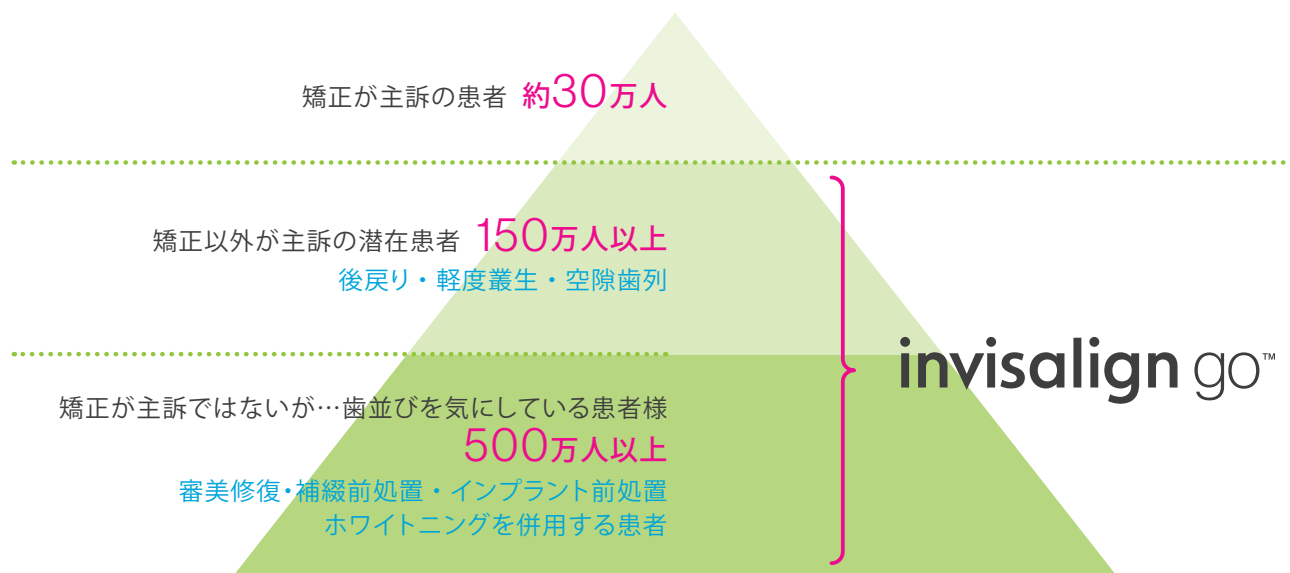

※当社調べ

マーケット・リーダーとしてのアライン・テクノロジー社

設立	1997年3月
本社所在地	アメリカ, アリゾナ, テンピ
上場年月取引所	2001年1月 米国NASDAQ 市場 ALGN-(NASDAQ)

年間売上

\$38億

従業員数

23,000人

インビザライン® システム、
インビザライン Go™ システムで治療された患者様

18,000,000名

※ 2024年6月時点

マウスピース型歯列矯正装置

invisalign®
invisalign go™
invisalign go™ plus



口腔内スキャナー

iTero™



なぜインビザライン Go™ システムなのか？

インビザライン Go™ システムは、
歯科矯正の原理とフォースに基づいてデザインされており、
予測実現性のある臨床結果を達成することを目指しています。

invisalign go™

大臼歯を動かさない第二小臼歯間の治療オプション

インビザライン Go™ システム導入のメリット



予測実現性

- 治療前に治療のゴールがイメージできる



効率性

- スタッフがカウンセリングしやすい
- 治療期間短縮による効率向上が期待できる

インビザライン Go™ 治療オプションと臨床的パラメータ (概要)

	インビザライン Go™
アライナーの数	最大20ステージ
適応範囲	• 第二小臼歯～第二小臼歯間 • クラスⅠ • A-P関係の改善なし
叢生	片顎6mm以下
空隙	上顎：変動あり 下顎：3mm以下
オーバーバイト改善	片顎2.5mm以下
正中不一致	1mm
A-P（前後の）関係改善	対象外
抜歯	対象外
追加アライナー条件	• 初回アライナー出荷日から1年以内：1回分は価格に含まれる

※初回出荷日から2年間アライナーをご注文いただけます。2回目以降の追加アライナーは別途費用が発生いたします。

臨床プロトコルの 範囲内で、 幅広い症例に対応可能

空隙 11ステージ、2か月間



捻転 20ステージ(+追加アライナー上下1回)、6か月間



正中線の不一致 14ステージ、3か月間



叢生 16ステージ、4か月間



※本資料で掲載された症例は参考治療例であり、治療結果、治療期間等は、患者様の歯列や口腔の状態により異なります。掲載された治療結果、治療期間等を保証するものではありません。
※アライナー1ステージ当たりの装着期間は、患者様の歯列や口腔の状態によって異なります。歯科医師の指示に従ってください。
※使用上の注意、適応、禁忌事項等はインビザライン・システム取扱説明書や歯科医師の指示に従ってください。

invisalign go™ plus

第一大臼歯間の治療オプション



生産性

- 多くの院内ワークフローをスタッフで担え、ドクターのチェアタイム短縮に寄与する
- 来院頻度が少ない傾向にある

インビザライン Go™ Plus 治療オプションと臨床的パラメータ (概要)

	インビザライン Go™ Plus
アライナーの数	最大26ステージ
適応範囲	• 第一大臼歯～第一大臼歯間 • クラスⅠおよび、軽度クラスⅡ • 犬歯の軽度のA-P（前後的）関係改善
叢生	片顎8mm以下
空隙	上顎：変動あり 下顎：4mm以下
オーバースタイル改善	片顎2.5mm以下
正中不一致	1mm
A-P（前後的）関係改善	犬歯で最大2mm
抜歯	対象外
追加アライナー条件	• 初回アライナー出荷日から2年以内：2回分は価格に含まれる

※初回出荷日から3年間アライナーをご注文いただけます。3回目以降の追加アライナーは別途費用が発生いたします。

前突 13ステージ、6か月間



叢生・クロスバイト 17ステージ(+追加アライナー上2回・下1回)、13か月



補綴前のスペースメイキング 14ステージ、3か月間



一般歯科医師による
インビザライン Go™ システムの
使い方を学べます

臨床に役立つオンライン
動画をいつでも視聴可能

患者教育／スタッフ教育の
動画もご用意

※本資料で掲載された症例は参考治療例であり、治療結果、治療期間等は、患者様の歯列や口腔の状態により異なります。掲載された治療結果、治療期間等を保証するものではありません。
※アライナー1ステージ当たりの装着期間は、患者様の歯列や口腔の状態によって異なります。歯科医師の指示に従ってください。
※使用上の注意、適応、禁忌事項等はインビザライン・システム取扱説明書や歯科医師の指示に従ってください。

インビザライン治療には欠かせない 患者コミュニケーションを加速する デジタルツール

治療ゴールに納得して、患者さんとともにゴールを目指す

充実したチェアサイドのデジタルツール

患者コミュニケーションを加速する、チェアサイドのデジタルツール


Invisalign® Practice アプリ

スマートフォンで口腔内の
写真を撮影後、1分で症例
の難易度の参考情報を提示



Invisalign Smile View™

患者様が自分の顔
写真を撮影し、た
った1分で新しい笑
顔のイメージを作成

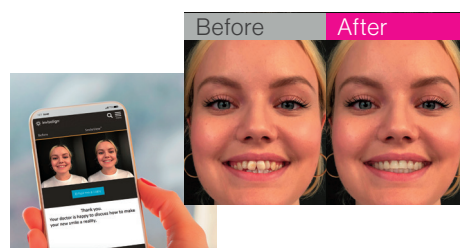


予測実現性のある治療計画の作成を支援 クリンチェック® 治療計画

インビザライン Go システムのプロトコル内で、
ドクターが希望する治療計画の作成を支援します。


治療ゴール、歯牙の移動量、ステージ数、アタッチメ
ントの位置、IPRの量が確認できます。

治療ゴールやアタッチメントの位置、IPRの量に対し
て修正指示も出せます。

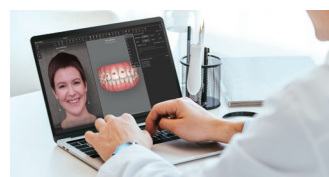

In-face ツール

歯牙の最終位置を笑顔の写真に埋
め込むことで、スマイルの Before
After もイメージできる

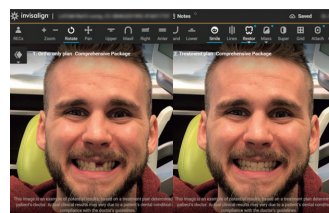


インビザライン・ スマイルアーキテクト™

矯正治療と補綴治療の治療計画を
連結し、より良いスマイルデザインの
立案を可能にします

インビザライン Go™ システム ワークフロー



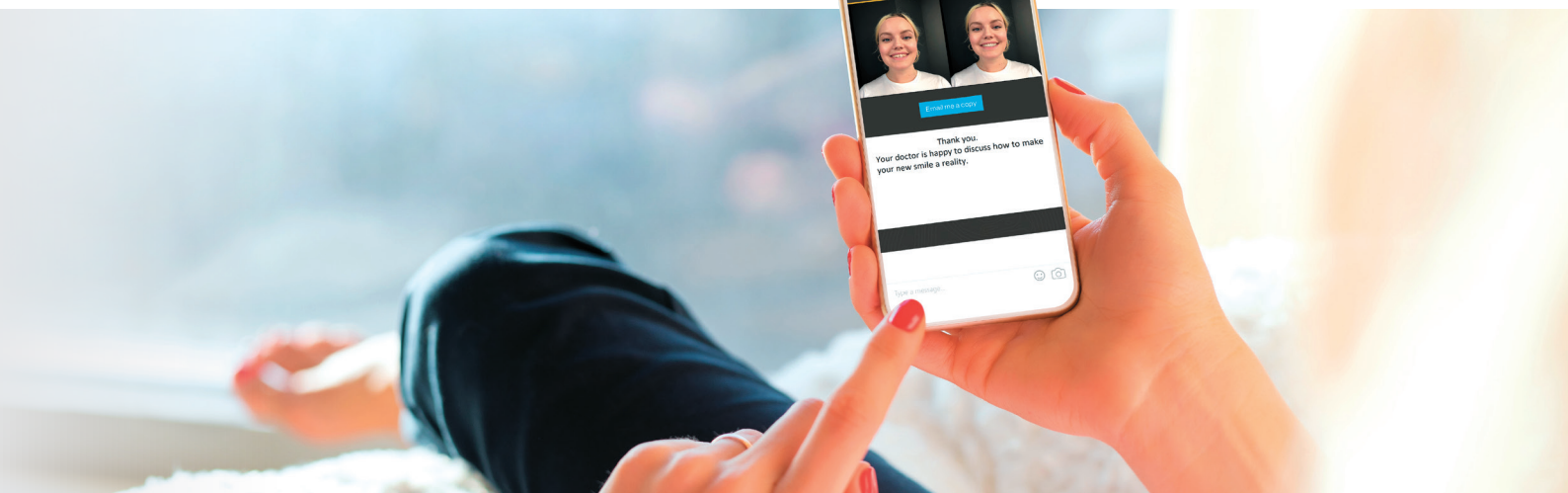


一度のスキャンでインビザライン Go™ 治療の Before After をイメージできる

一度のスキャンで治療ゴールを患者さんに見せられる
iTero アウトカム・シミュレーター

インビザライン Go システムで治療をした場合の Before After シミュレーションをチェアサイドで患者様にお見せできます。

難易度が高い場合でも、予測実現性がある範囲で、Before After が表示されます。

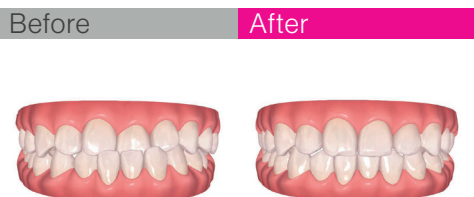

患者様だけでなくドクターも、インビザライン Go™ でどこまで治療できるかをイメージしやすくなります。



5 受注 & 製造 & 発送

アライナー製造後
クリニックへお届け



アライナー使用例

【使用例】アライナー 20 ステージで、
1 週間交換の場合

【決まり事】
・1日 20 時間以上の使用
・新しいアライナーは就寝前に交換
・アライナーチューイーの使用

治療開始 ...> 1週間経過 ...> 2週間経過 ...> 20週間経過 ...> 治療終了
ステージ1 ステージ2 ステージ20



オンライン インビザライン Go™ システム導入コースのご案内

矯正専門医でなくとも、インビザライン Go™ システムの使用が可能です。

大臼歯を動かさない第二小臼歯間の治療オプション「インビザライン™ Go」と
第一大臼歯間の治療オプション「インビザライン Go™ Plus」がごございます。

開催コース受講料 **¥48,000 (税別)**

モジュール未聴講かつお申し込み後1か月以内に、キャンセルのお申し入れをいただいた場合、返金を行います

オンラインモジュールの内容

- ・インビザライン Go™ システムの概要
- ・歯牙移動のバイオメカニクス
- ・症例評価
- ・症例提出
- ・クリンチェック® 治療計画の確認と承認
- ・治療開始
- ・治療のモニタリング
- ・フィニッシングと保定
- ・クリンチェック® 治療計画における3Dコントロールと利用可能なツール

※コース内容は変更される可能性があります。予めご了承ください

受講要件

- ・日本国内の歯科医師免許を有する方
- ・患者様の幅広いニーズに対応されたい方

認定要件

申し込み後、1年以内に以下①と②を完了してください。

- ①オンラインモジュール受講をすべて完了（約2時間）
 - ②少なくとも1症例の患者資料の提出とクリンチェック® 治療計画の作成
- ※1年以内にコース認定に至らなかった場合は、再度お申込み頂く必要があります。

お申込み方法

下記リンクよりアクセスしていただき、必要事項をご入力の上お申込みください。
<https://www.igo-jp.com/seminar>



その他ご案内

本コースご参加の先生には、弊社営業担当が事前にご連絡し、インビザライン Go™ システムの基本的な説明をさせていただきます。

受講特典 1

最大 20 症例が割引！(認定日～180 日間)

適用期間	症例数	割引率
認定日～ 90 日 ¹	初回1症例目	50%
	2～6 症例	25%
	7 症例目以降	20%
91 日目～ 180 日目 ²	90 日目までの症例を 含む最大 20 症例	

*期間および症例条件などの詳細は「インビザライン Go™ システム 導入コース申込書 及び 新規ドクタープログラム同意書」をご確認ください。

*割引適用期間内にクリンチェック® 治療計画が承認された症例 (CCA) に割引が自動適用されます。

- 1：認定日から起算して90日以内
- 2：認定日から起算して91日から180日目

受講特典 2

6 症例分の「治療計画サポートサービス」が、受講料に含まれます。
(認定日～12 か月間)

- ・治療計画作成前に、撮影した症例写真と評価結果を踏まえたアドバイス
- ・新規症例のクリンチェック® 治療計画の確認／修正／提案



お問い合わせ先

インビザライン・ジャパン合同会社 カスタマーサポート

受付時間：平日 10：00～17：00（土日祝日を除く） TEL：0120-944-449（フリーダイヤル） E-mail：info-japan@aligntech.com

©2025 Align Technology, Inc. Align, Invisalign, Invisalign Go, Invisalign Go Plus, the starflower mark, SmileView, SmartTrackおよびInvisiは Align Technology, Inc. の商標です。

本資料にて示される臨床情報および推奨される内容については、インビザライン Go™ システムを使用する一歯科医師の立場における個人的な見解に基づくものであり、実際に臨床応用されるか否かについては、あくまで担当医の個人的裁量、判断、責任に委ねられるべきものです。

販売名：iTeroエレメント（承認番号：22900BZX002220000）

販売名：iTero Lumina Core口腔内スキャナー（承認番号：30500BZX00270000）

一般的名称：デジタル印象採得装置 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 歯科診断用口腔内カメラ

特定保守管理医療機器への該当性：該当

販売名：クリンチェック・ソフトウェア（承認番号：23000BZX00197000）

一般的名称：歯科矯正用治療支援プログラム

特定保守管理医療機器への該当性：非該当

販売名：SmartTrackアライナーシート（認証番号：225ADBZ100001000）

一般的名称：歯科矯正用レジン材料



インビザライン・ジャパン合同会社

〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル